



# CAD/CAM Bur Set Basic (19本組)

## Guide Groove

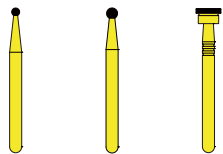

## Crown Preparation

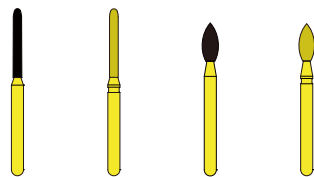



品番	RKC-1	RKC-2	RKC-3	RKC-4	RKC-4ff	RKC-5	RKC-5ff
ISO	001/010	001/015	041/035	141/011	141/011	243/022	243/020
ダイヤ長(mm)	0.8	1.1	0.7	9.0	9.0	5.0	5.0
先端径(mm)	1.0	1.5	3.5	1.1	1.1	2.2	2.0
元径(mm)	—	—	形成溝深サ 0.3	—	—	1.2	1.0
全長(mm)	19.0	19.0	19.0	22.0	22.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	45	45	16	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	450	450	1,000	800	800	800	800

セット販売のご案内  
**CAD/CAM Bur Set Basic**はデンツプライシロナ<sup>株式会社</sup>により発売されたCEREC Bur Setと同内容のセットです。  
 現在CEREC Bur Setは販売を行っていませんので、セットでお買い求めの際は、**CAD/CAM Bur Set Basic**とご指定下さい。  
 歯科材料店、又は弊社よりお求め頂けます。  
 単品(5本入り)は、引き続きデンツプライシロナ<sup>株式会社</sup>が発売元となっておりますので、発売元よりお買い求め下さい。


## 単品のお問い合わせ先

発売元：デンツプライシロナ<sup>株式会社</sup>  
 東京都中央区銀座8-21-1  
 住友不動産汐留浜離宮ビル5F  
 TEL 03-5148-7895  
 又は、各地営業所へお問い合わせ下さい。

## Inlay Preparation

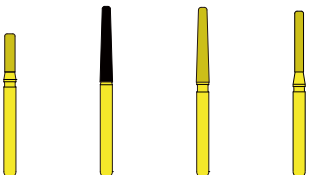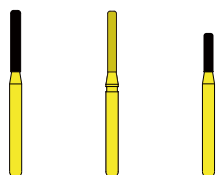


## Cement Remove & Finish

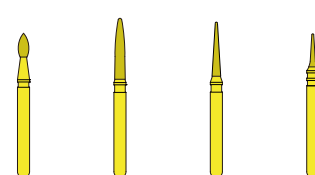

品番	RKC-6	RKC-6ff	RKC-7	RKC-7ff	RKC-8	RKC-8ff	RKC-9ff	RKC-10ff	RKC-11ff	RKC-12ff	RKC-13ff	RKC-14ff
ISO	158/014	158/014	156/014	156/014	553/017	553/017	158/012	546/010	254/014	249/013	165/013	465/010
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	5.0	5.0	10.0	10.0	8.0	8.0	3.2	8.0	7.0	4.4
先端径(mm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	0.5	1.4	—	—	—
元径(mm)	—	—	—	—	1.7	1.7	—	1.0	0.9	1.3	1.3	1.05
角度(°)	—	—	—	—	3.5	3.5	—	3.5	—	—	7.0	—
全長(mm)	22.0	22.0	19.0	19.0	22.5	22.5	22.0	22.0	19.0	21.0	20.5	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800	800	800	550	700	700	800

包装単位：19本セット(各形態1本入り) ¥14,250  
 専用バースタンド...¥750  
 各形態別に5本入り


# CAD/CAM Bur Set Advance

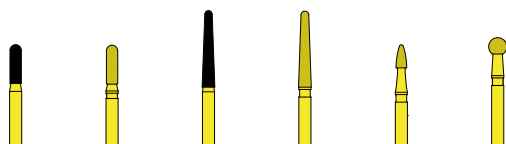

品番	RKA-15	RKA-15ff	RKA-16	RKA-16ff	RKA-17ff	RKA-18ff
ISO	139/015	139/015	199/017	199/017	015	001/024
ダイヤ長(mm)	5.0	5.0	10.0	10.0	3.0	2.2
先端径(mm)	—	—	1.0	1.0	0.4	—
元径(mm)	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	2.4
角度(°)	—	—	4.0	4.0	—	—
全長(mm)	19.0	19.0	23.5	23.5	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	700	700

監修：風間龍之輔・青藍一郎・新井祐貴

CAD/CAM Bur Set Advanceは、従来のCAD/CAM Bur Set Basicに追加するバーとして企画されたバーセットです。  
 最新の研究によって提唱されたCEREC修復の形成要件に沿った形成や、修復物セット後の形態修正に適します。

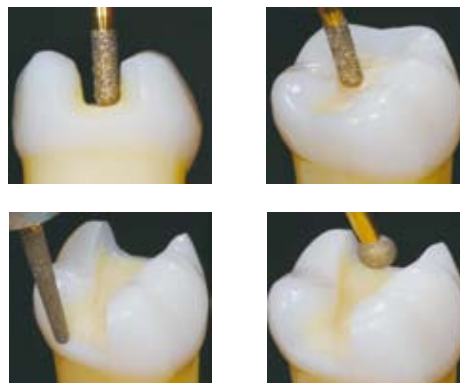

CAD/CAM インレー修復の咬合面窩洞形成、咬合面に水平にRKA-15/16を動かすことで、テーパー、窩底形態など、最適な窩洞外形を付与することができる。概形成後、ダイヤモンド粒子の細かいRKA-15ff/16ff/18ffを用いて、窩洞内に残っている角を丸めるように形成の仕上げを行う。

包装単位：6本セット(各形態1本入り) ¥4,600 バースタンドは別売：¥750  
 各形態別に1箱5本入り：RKA-15, RKA-15ff, RKA-16, RKA-16ff 各 ¥4,000  
 RKA-17ff, RKA-18ff 各 ¥3,500