

ショルダー OK バー

ショルダーマージン部の形成をもっと楽に！

オールセラミック クラウンの普及に伴いショルダーマージンを正しく形成することが益々重要になって来ました。従来のダイヤモンドバーでは、歯肉のスキヤロップの強い症例においては、遊離エナメルやJ型マージンを作りやすく適切なショルダー形態に仕上げるためには細心の注意が必要でした。

しかしこのバーシステムでは、バーの先端に20°、30°の湾曲を与えることで、バーを歯軸と平行にして形成するだけで遊離エナメルや凹凸の無い均一なショルダーマージンの形成が出来ます。


岡口守雄先生 東京都千代田区開業



バーを歯軸に平行にして研削するだけで遊離エナメルや凹凸の無い均一なショルダーマージンが得られる




基本セット

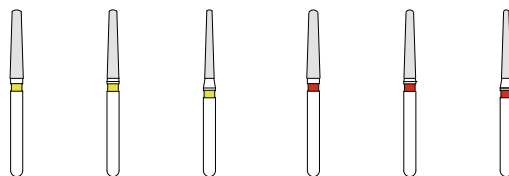

品番	2012 ff	2010 ff	2007 ff	3012 ff	3010 ff	3007 ff
先端湾曲	20°			30°		
ダイヤモンド長(mm)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
先端径(mm)	1.2	1.0	0.7	1.2	1.0	0.7
元径(mm)	1.75	1.55	1.25	1.75	1.55	1.25
角度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
全長(mm)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
使用部位	前歯・臼歯		隣接面	最後臼歯		隣接面
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800

包装:6本セット(6形態各1本入)・・・¥4,800
単品各5本入り

OPTION

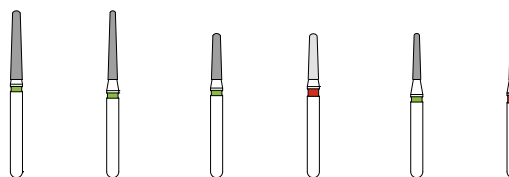

品番	3010 f	3007 f	3110 f	3110 ff	3107 f	3107 ff
先端湾曲	30°		30°		30°	
ダイヤモンド長(mm)	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	6.0
先端径(mm)	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7
元径(mm)	1.55	1.25	1.37	1.37	1.07	1.07
角度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
全長(mm)	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0	19.0
使用部位	前歯・臼歯	隣接面	最後臼歯		最後臼歯隣接面	
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800

包装:6本セット(6形態各1本入)・・・¥4,800
単品各5本入り