

Dr. Kubota Selection CAD/CAM Preparation Set

窪田歯科 窪田努先生監修

CAD/CAMのための支台歯形成用バーセット


CAD/CAM補綴物のマージン形態に適したシャンファー形態を持つSJCDバーで構成しています。

形成用バーと同形態の仕上用fffバーでのスムーズな仕上により、正確なスキャンが可能です。

CAD/CAMミリングバーを考慮した、切端と隅角部を丸めるK-1527fff(下段右端)を組み入れています。

バースタンド付き 医院価格 ¥15,600(税抜)

SJCD 2ff 5ff 6ff SJCD 5Rff D-11Rff 4ff

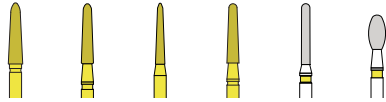

下段と同形態の仕上げ用ff



SJCD SV5

深さ0.5mmのガイドグループ
または切端削除用



SJCD 1

フィニッシュラインの形成
シャンファー形態
先端径1.2mm



SJCD 5

フィニッシュラインの形成
シャンファー形態
先端径1.0mm
隣接軸面形成



SJCD 6

フィニッシュラインの形成
シャンファー形態
先端径0.6mm
隣接軸面形成



SJCD 5R

フィニッシュラインの形成
シャンファー形態
先端径1.0mm
隣接軸面形成



D-11R

2, 3面の軸面形成に適した平行バー



SJCD 4



前歯舌側、臼歯咬合面の形成



K-1527 fff

臼歯部咬頭隅角部および前歯部切端に
丸みを持たせるのに最適
先端凸部が小さく、隣在歯を傷つけにくい

※仕上研磨用バーにつき、金属切削には使用できません
ダイヤ粒子に金属が付着し目詰まりを起こします

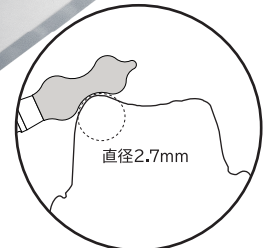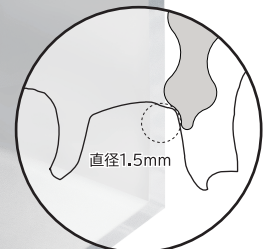

メリーダイヤ 13B3X00256000001
SJCDバー 13B3X00256000003

※記載内容は改良のため予告なく変更することがあります。

MARY DIA
Diamond Instruments FG

新製品情報は <https://marydia.jp/>

株式会社 日向和田精密製作所

〒198-0046 東京都青梅市日向和田3-698
TEL 0428-24-3711 FAX 0428-24-3733